

# UFI FILTERS MEDIZINISCHE EINWEGMASKE FÜR ERWACHSENE


## DREI SCHUTZSCHICHTEN

FILTRATIONSEFFIZIENZ	≥ 95%
DIFFERENZDRUCK	< 40 Pa/cm <sup>2</sup>
MIKROBIELLE SAUBERKEIT	≤ 30 cfu/g



### 1 WASSERBESTÄNDIGER VLIESTOFF

Filtration von Partikeln der Größe  $3,0 \pm 0,3 \mu\text{m}$

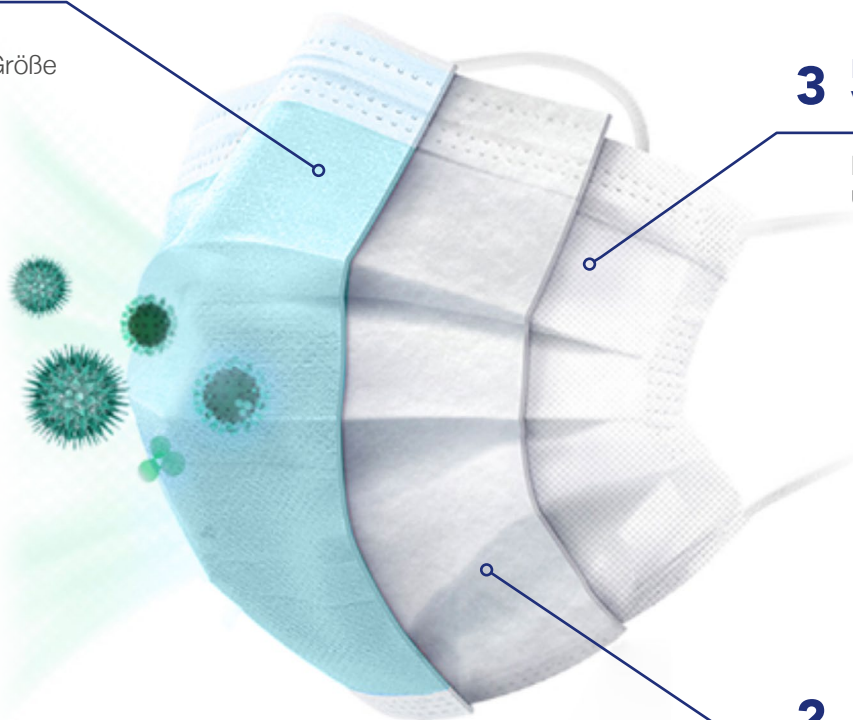

### 3 HYGROSKOPISCHER VLIESTOFF

Fein, komfortabel und atmungsaktiv

### 2 MELTBLOWN

Doppelte Verstärkung, verhindert das Eindringen von Staub



UFI FILTERS  
CHOSEN BY THE BEST

[www.ufifilters.com](http://www.ufifilters.com)

# UFI FILTERS MEDIZINISCHE EINWEGMASKE FÜR ERWACHSENE

## MERKMALE

- + Dreilagige Maske mit Ohrbändern und verstellbarem Nasenbügel.
- + Produkte gemäß EN 14683:2019 Typ 1.
- + Die Produktionslinie befindet sich bei UFI Filters Shanghai.
- + Die Masken werden in Einzelverpackungen aus Kunststoff geliefert, um die Sauberkeit zu wahren und Kontaminationen zu vermeiden.
- + Sie müssen an einem sauberen, belüfteten und trockenen Ort, fernab von direktem Licht und offenen Flammen gelagert werden.
- + Empfohlene Anwendungsdauer: nicht mehr als vier Stunden.
- + Shelf Life: Zwei Jahre.

NASENKLAMMER MIT  
ULTRASCHALLVERSCHWEISSUNG



OHRBÄNDER  
ULTRASCHALLGESCHWEISST

20 STÜCK  
EINZELN VERPACKT



HELLBLAU

35.011.71

2024 – Copyright © UFI FILTERS spa



UFI FILTERS  
CHOSEN BY THE BEST

[www.ufifilters.com](http://www.ufifilters.com)